



Nuevo diseño más compacto y ergonómico

Panel de control situado en la parte frontal de la consola, que permite un fácil acceso a la programación de temperaturas y horarios.

Ocho áreas de temperatura programables independientemente: Depósito de parafina, Pinzas, Área de trabajo, Válvula, Cámara Izq., Cámara derecha, Conducto, y Crioconsola

Las áreas de trabajo están totalmente aisladas lo que permite aumentar el confort en el trabajo.

Depósito de parafina con una capacidad de 5 litros.

Las teclas del panel de control están agrupadas de forma ergonómica para facilitar su manejo. El panel de control, situado en el frontal de la Consola Dispensadora, dispone de una pantalla LCD que permite visualizar todas las temperaturas, tanto las de la Consola Dispensadora como las de la Crioconsola.



Parámetros programables desde el panel de control:

- Programación de la temperatura de cada área de trabajo (tanto fría como caliente).
- Control de puesta en marcha y paro automático del sistema modular completo.
- Programación de intervalos de no funcionamiento por vacaciones.
- Puesta en marcha manual independiente de la Consola Dispensadora y de la Crioconsola.
- Registro histórico de alarmas.
- Control del encendido de la luz que ilumina la zona de dispensación de la parafina.
- Selección del idioma (español, inglés, francés, italiano, alemán).
- Selección de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.


Amplia zona caliente con canales de drenaje a dos cajones de residuos. Salida de la parafina controlada por medio de una placa táctil o de un pedal.

Caudal de parafina ajustable mediante un mando regulador de caudal situado en la parte superior del grifo dispensador de parafina con indicador de posición.

Iluminación de la zona del grifo dispensador de parafina por medio de LEDs de alta luminosidad, que reducen la fatiga visual. También se obtiene un ahorro sustancial de consumibles

Amplia área fría aislada.

6 orificios calefactados (tres a la derecha y tres a la izquierda del grifo) para alojamiento de las pinzas, que garantizan un óptimo manejo de las muestras.

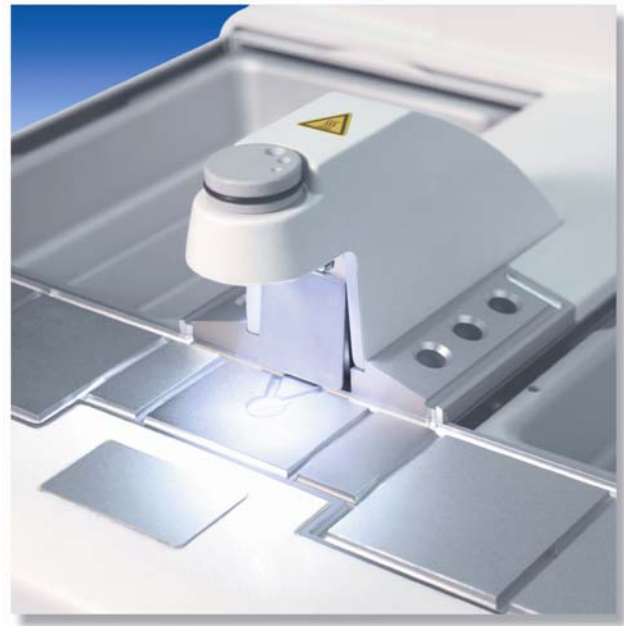


Dos cámaras de almacenamiento a izquierda y derecha del grifo dispensador, pueden ser usadas como baños de parafina o para almacén caliente de moldes indistintamente.

Dos bandejas extraíbles para las cámaras (para parafina o moldes).

Lupa de aumento, forma parte del equipo.

Pedal para dispensación de parafina, forma parte del equipo.

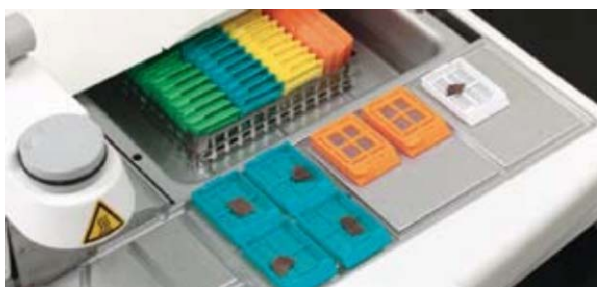

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**MEDIDAS**

Medidas Consola:	650x595x432mm
Peso:	27,8 kg
Bandejas extraíbles:	261 x 175 x 55 mm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Tensión nominal:	AC 100-120V AC ($\pm 10\%$) AC 220-240V AC ($\pm 10\%$)
------------------	--

Frecuencia de red:	50-60Hz
--------------------	---------

Consumo:	7,5A a 100-120V/50-60Hz 3,6A a 220-240V/50-60Hz
----------	--

CAPACIDADES

Depósito de parafina:	5 L aprox.
Cámaras inferiores:	1, 7 L aprox.

RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE

Depósito de parafina:	50°C a 70°C
Cámaras izq./der.:	50°C a 70°C
Placa caliente:	50°C a 70°C
Calienta pinzas:	50°C a 75°C

ACCESORIOS:	Lupa de aumento (de serie) Pedal (de serie)
-------------	--

MyrEspecialidades Médicas **Myr**, S. L.

C/ Vidriers, parcela 31. Pol. Ind. "La Cometa"
43700 El Vendrell – Tarragona
Teléfono 34-977 66 80 Fax 34-977 6680 30
e-mail: esp.myr@arrakis.es

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA:**SEDE CENTRAL**Mayor, 70, Bajo Dcha. • 28013 MADRID • atencionalcliente@casaalvarez.com • Tfno.: 915 481 016**Delegación BARCELONA** • cabarna@casaalvarez.com • Tfno.: 934 334 400**Delegación GRANADA** • ca.granada@casaalvarez.com • Tfno.: 679 596 912**Delegación VALENCIA** • ca.valencia@casaalvarez.com • Tfno.: 634 952 079**Delegación SEVILLA** • ca.sevilla@casaalvarez.com • Tfno.: 683 144 056