



# DAKEWE

Sistema combinado de tinción DP360 y  
montador de portaobjetos CS600

Cobertura y resultados impecables.



### Disfrute de un proceso automatizado con gran capacidad.

Capacidad para 500 cubreobjetos y la estación de carga y descarga continua con capacidad de hasta 300 portaobjetos, liberan a los técnicos de la carga y descarga repetitiva. Permiten un flujo de trabajo ininterrumpido.



### Secado rápido

La estación de descarga, climatizada y bien ventilada, acelera la disponibilidad de preparaciones.



### Adaptabilidad

Maneja sin problemas cubreobjetos de 50, 55 y 60 mm con cargadores adaptables, al tiempo que ofrece un control intuitivo del medio de montaje para todas las aplicaciones, compatible con la mayoría de los medios de montaje disponibles comercialmente.

## CS600

### Montador de cubreobjetos



### Seguridad para el usuario

El teñidor DP360 activa su sistema de extracción para eliminar eficazmente los gases cuando las concentraciones alcanzan umbrales críticos, garantizando así una seguridad óptima para el usuario.



### Sin complicaciones y con máximo control

Los sensores de nivel de precisión monitorizan continuamente el volumen del medio de montaje y del reactivo de limpieza, evitando interrupciones en el proceso y eliminando la urgencia de reponer reactivos en el último momento.

La inmersión automática de las boquillas y la limpieza periódica de los tubos reducen el riesgo de obstrucciones y burbujas, y además ofrecen altos niveles de estabilidad.

## "Teñidor Automático





Integrado,  
y Práctico"



### Trazabilidad de portaobjetos



Equipado con un lector de códigos integrado, el montador CS600 se conecta al teñidor Dakewe DP360 para ofrecer una monitorización completa del proceso, haciendo un seguimiento de protocolos, reactivos y operaciones que permiten una perfecta integración con el LIS.

### Versatilidad



Maneja sin esfuerzo múltiples protocolos simultáneamente, eligiendo entre 100 protocolos de tinción, incluyendo histología, citología, biopsias congeladas y más.

### Calidad de tinción óptima



Cuatro estaciones de calentamiento de reactivos facilitan una tinción eficaz. Los racks de portaobjetos especialmente diseñados y los movimientos del brazo robótico reducen la contaminación cruzada.

## DP360


### Teñidor de preparaciones

### Homogeneidad optimizada de forma inteligente




La tecnología AAT mantiene la tinción consistente de acuerdo con la muestra, el número de gradillas de tinción y los días de uso de hematoxilina y eosina, aumentando la calidad en la tinción y reduciendo costos de reactivo.





Primera tinción

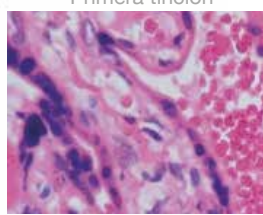

Tinción nº 1000

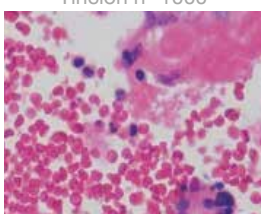

Tinción nº 2000

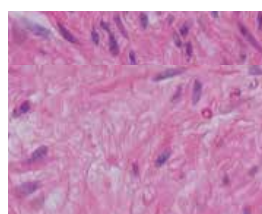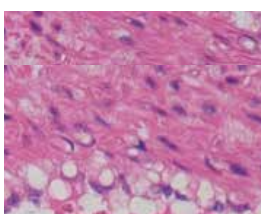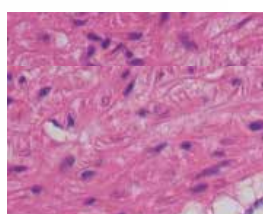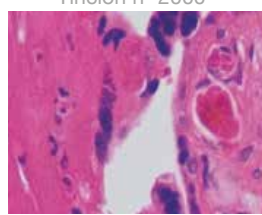



## Especificaciones

### Teñidor de portaobjetos DP360

Dimensiones (Ancho×Profundidad×Altura)	1.066 × 700 × 630 mm
Peso neto	Aprox. 130 kg
Consumo de energía	1.200 VA
Tensión/frecuencia	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Estaciones totales	26
Horno	1; Temp. máx 75°C
Estaciones calef. reactivos	4; Temp. máx 40°C
Estaciones de lavado	4
Estaciones de carga/descarga	4 en total, ajustables
Vol. estación de reactivos	480 ± 20 ml
Capacidad de programas	≥ 100
Capacidad del cestillo	30 portaobjetos

## Especificaciones

### Montador CS600

Dimensiones (Ancho×Profundidad×Altura)	700 × 650 × 665 mm
Peso neto	Aprox. 89 kg
Tensión/frecuencia	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Dimensión portaobjetos	(24.8 - 26.2) × (74.8 - 76.2) mm
Longitud de los cubreobjetos	50, 55, 60 mm
Capacidad de los cubreobjetos	Hasta 500 cubreobjetos en 5 cargadores
Capacidad estación de descarga	Hasta 300 portaobjetos
Temperatura del horno	50°C
Puesto de trabajo	Puede utilizarse de forma independiente o integrado con el teñidor DP360.

# DAKEWE

Dakewe medical  
Shenzhen, China  
www.dakewemedical.com  
Ver. 1.0, Rev. Jan 2025



#### SEDE CENTRAL

Edificio Vega, C/ Velázquez, 157 - 4ª planta • 28002 MADRID  
atencionalcliente@casaalvarez.com • Tel.: 91 548 10 16

#### Delegación BARCELONA

cabarna@casaalvarez.com • Tel.: 644 282 518

#### Delegación GRANADA

ca.granada@casaalvarez.com • Tel.: 679 596 912

#### Delegación VALENCIA

ca.valencia@casaalvarez.com • Tel.: 634 952 079

#### Delegación SEVILLA

ca.sevilla@casaalvarez.com • Tel.: 683 144 056

#### Servicio de Asistencia Técnica

sat@casaalvarez.com • Tel.: 91 548 10 16

[www.casaalvarez.com](http://www.casaalvarez.com)